

Oxycycle I Magneciser - Pédalier actif



Codes produits :

Référence 244756

caractéristiques du produit :

Ergomètre: Oui
Système de freinage: Magnétique progressive
Niveaux de résistance: 5
Zones travaillées: Membres inférieurs
Zones travaillées: Membres supérieurs
Travail: Actif
Puissance: 30 W
Données affichées: Temps
Données affichées: Calories
Données affichées: Vitesse
Données affichées: Cadence
Longueur: 50 cm
Largeur: 46 cm
Hauteur: 38 cm
Poids: 9 kg
Alimentation: Secteur
Durée d'utilisation: 1 h/jour

Description brève du produit :

Le pédalier actif OxyCycle 1 **Magneciser actif** est utilisé pour faire travailler le haut et le bas du corps. Sa résistance réglable le rend idéal pour renforcer progressivement les bras et les jambes de vos patients. Cet appareil est une parfaite alternative au vélo de marche traditionnel.

Description du produit :

Le **pédalier Actif OxyCycle 1 Magneciser** est un outil polyvalent conçu pour stimuler à la fois le haut et le bas du corps. Doté d'une résistance réglable, cet appareil vous permet de renforcer progressivement les bras et les jambes, offrant une alternative idéale au vélo traditionnel.

Léger et compact, le pédalier OxyCycle 1 est équipé d'un écran LCD multifonction affichant les données essentielles telles que le temps, la distance parcourue, les calories brûlées et les tours par minute. Ses pédales manuelles interchangeables offrent une grande praticité. Que ce soit pour un travail sur les jambes en position assise ou sur une table pour les bras, cet appareil s'adapte à les besoins.

Que ce soit pour un entraînement actif ou une utilisation à domicile, l'OxyCycle 1 deviendra rapidement un élément indispensable de votre routine d'exercice. Renforcez efficacement vos membres avec l'OxyCycle 1, un exerciceur à pédales polyvalent pour un entraînement complet du corps.

NB : ne montez pas sur l'oxycycle I en position debout. Cet appareil s'utilise uniquement en position assise.

Les équipements du pédalier actif Oxycycle 1 Magneciser

- Bouton de résistance réglable.
- Minuteur : 15 min maxi.
- Mise en veille automatique après environ 4 minutes sans utilisation.
- Compteur électronique : affichage du temps d'entraînement, de la vitesse, du nombre de tour/min et des calories dépensées.
- Portable et peu encombrant.
- Roue d'inertie.
- Stabilisateur de niveau.




Pédales

Les pédales à sangle sont équipées de fermetures à boucles et crochets (velcro de marque générique), garantissant un ajustement optimal.



Poignées

Placez l'appareil sur une table et les poignées vous permettent de réaliser des exercices de renforcement des bras.

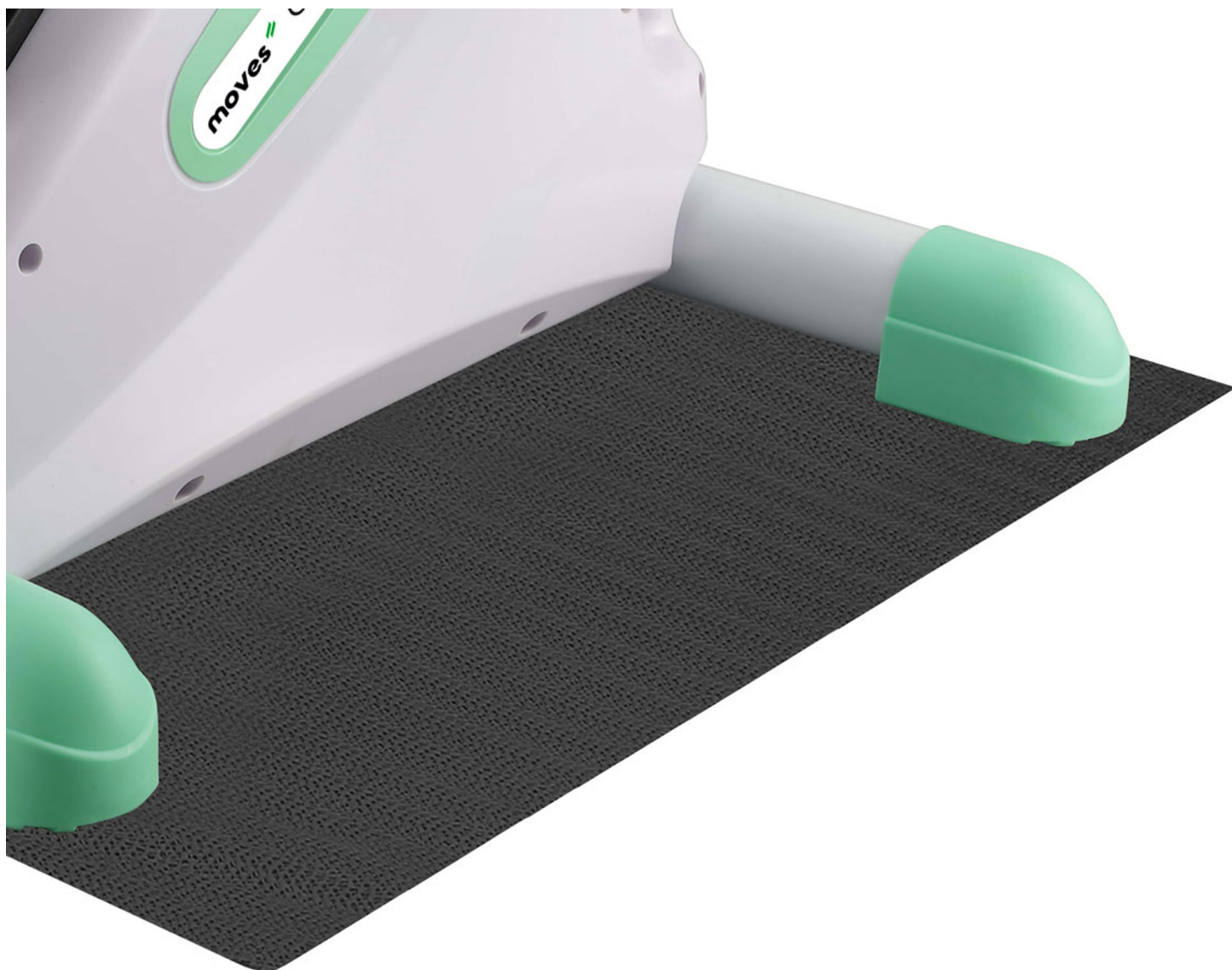

Tapis anti-glisse

Le tapis anti-glisse permet une sécurité supplémentaire lors des entrainements avec l'Oxycycle 1.

Les caractéristiques de l'Oxycycle 1 Magneciser - Actif

- Mode : actif uniquement.
- Système de freinage : magnétique manuel à réglage continu.
- Niveaux de résistance : 5.
- Puissance : 30 watts.
- Dimensions : 50 x 46 x 38 cm.
- Poids : 9 kg.
- Alimentation : secteur.
- Durée d'utilisation conseillée : 1h/jour et 30min/session.

L'oxycycle I est livré avec 1 paire de pédales pour pieds, 1 paire de poignées pour main et 1 tapis anti-glisse.

Attributs du produit :