

i-Press séries 6 avec paire de bottes - appareil de pressothérapie

Codes produits :

Référence 280034



caractéristiques du produit :

Appareils: i-Press séries 6
Pression: 30 - 100 mmHg
Nbre de programmes: 21
Nbre de cellules: 6
Contenu du pack: 1 paire de bottes 6 cellules
Contenu du pack: 1 appareil
Affichage: Via application (bluetooth)
Connectique: Bluetooth
Alimentation: Secteur

Description brève du produit :

i-Press Séries 6 : pressothérapie connectée, 6 cellules, pilotage Bluetooth, programmes sur mesure pour la rééducation en cabinet de kinésithérapie.

Description du produit :

i-Press Série 6 - Appareil de pressothérapie connecté

La **pressothérapie i-Press série 6** incarne la nouvelle génération du modèle 6C (désormais indisponible). Ce dispositif innovant est conçu pour le traitement des pathologies chroniques et se distingue par sa connectivité : il se pilote directement depuis une application dédiée sur smartphone ou tablette (Android et iOS) via Bluetooth, sans écran intégré à l'appareil.

Grâce à ses programmes prédéfinis et personnalisables, ainsi que son fonctionnement séquentiel, l'i-Press série 6 offre un confort optimal aux patients. Chacune des **6 cellules** exerce une pression contrôlée, avec des mouvements coordonnés s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque séance. Véritable complément aux techniques manuelles, il est parfaitement adapté à un usage en cabinet, alliant performance, praticité et simplicité d'utilisation.

Les avantages de l'i-Press séries 6

Utilisation simple et personnalisée

- **2 modes d'utilisation** : autonome (1 programme prédéfini) ou connecté via l'application mobile.
- Programmes physiopathologiques **adaptés à de nombreuses pathologies**, dont les formes chroniques sévères comme le lymphoedème.

- **Traitement personnalisé** : sélection et isolation des cellules, mémorisation de 20 protocoles.
- **Réglages avancés** : pression, durée, suppression ou ciblage de cellules avec maintien prolongé (durée de pression et temps de repos non modifiables).
- **Affichage en temps réel** et **désactivation de cellules** via l'application.

Compression efficace et adaptable

- **Gonflage ajustable** : sens de gonflage ascendant ou descendant selon les besoins.
- **Action homogène** sur toute la circonférence pour un traitement uniforme et performant.
- **Synergie avec les techniques manuelles** : programmes conçus pour compléter les séances de drainage manuel.
- **Dégonflage automatique** en fin de traitement pour plus de confort.

Confort du patient et praticité

- **Confort optimal** : bottes légères, résistantes et conçues dans un matériau innovant.
- **Livré avec une paire de bottes 6 cellules.**
- **Installation rapide** : deux connecteurs suffisent pour activer les cellules.
- **Silencieux** : niveau sonore inférieur à 40 dBA.
- **Convient aussi aux soins esthétiques et à la relaxation.**

2 modes d'utilisation

Autonome

Ce mode permet d'utiliser l'appareil sans avoir recours à l'application mobile. Il donne accès à un programme prédéfini, idéal pour une utilisation rapide et simple, sans configuration spécifique.

Connecté

En connectant l'i-Press Série 6 à l'application mobile dédiée via Bluetooth, vous débloquez l'accès à l'ensemble des programmes proposés. Ce mode offre une personnalisation avancée des séances, avec des réglages adaptés à chaque patient et à chaque pathologie. (Connectivité Bluetooth, Android ou IOS).

Fonctionnement des programmes de l'I-Press séries 6

- **Programmes préétablis pour toutes les pathologies** : Accédez rapidement aux protocoles conçus avec des praticiens renommés pour traiter diverses pathologies (*avec l'application iPress*).
- **Traitement personnalisé et mémorisation avancée** : Personnalisez le traitement en sélectionnant et isolant électroniquement les cellules pour une action ciblée. Paramètres personnalisables : temps de travail, temps de repos, temps de séance, nombre de cycles...

21 programmes clés intégrés

[Jambes](#)

- Pathologies veineuses :
 - Insuffisances veineuses
 - Troubles circulatoires
- Œdèmes
 - Lipœdème
 - Œdèmes inflammatoires et post-traumatiques
- Lymphœdème
 - Thérapie décongestive
 - Récidive Lymphœdème
- Bien-être :
 - Détente
 - Récupération sportive

[Bras \(manchon en option\)](#)

- Lymphœdème :
 - Thérapie décongestive
- Œdème :
 - Œdème inflammatoire et post-traumatique
- Bien-être :
 - Détente
 - Récupération sportif

[Abdomen \(ceinture en option\)](#)

- Bien-être :
 - Détente
- Paresse intestinale
 - Massage stimulant

Les zones de pression



Cet appareil de pressothérapie sont conçus pour être utilisés avec des accessoires de compression ciblés, permettant une prise en charge efficace de plusieurs zones du corps :

- Membres inférieurs : traitement des jambes et des pieds via des bottes de compression.
- Membres supérieurs : traitement du bras et de l'épaule à l'aide d'un manchon de compression.
- Zone abdominale : traitement de l'abdomen grâce à une ceinture de compression.

L'action de ces dispositifs exerce une pression progressive et contrôlée sur les tissus, stimulant ainsi la circulation lymphatique et contribuant à la réduction des œdèmes, à la décongestion et au drainage.




Bras

Manchon de pressothérapie pour le bras - Idéal après une chirurgie mammaire ou un cancer du sein, ce manchon aide à prévenir et traiter les lymphœdèmes, les œdèmes post-opératoires et les troubles circulatoires. Il favorise le retour veineux et lymphatique pour une récupération optimale. (Manchons disponibles en option).



Sangle abdominale

Ceinture abdominale de pressothérapie - Conçue pour stimuler le drainage lymphatique, cette ceinture aide à éliminer les toxines, réduire les ballonnements et affiner la silhouette. Elle améliore la circulation veineuse au niveau de l'abdomen et du bas du dos, tout en apportant un soulagement musculaire et en facilitant la récupération après une intervention chirurgicale. (Ceinture disponible en option).

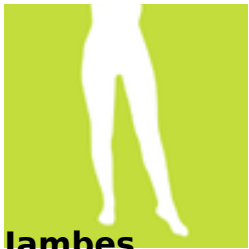

Jambes

Bottes de pressothérapie - Idéales pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique, ces bottes aident à éliminer les toxines, réduire la rétention d'eau et soulager les jambes lourdes. Elles contribuent à diminuer les œdèmes, améliorer la mobilité et accélérer la récupération post-opératoire, tout en réduisant le volume des zones traitées.

Les indications d'utilisation

- Lymphœdème.
- Jambes lourdes.
- Élimination des toxines Récupération musculaire / récupération sportive.
- Détente.
- Massage stimulant.
- Paresse intestinale.
- Sénologie
- Insuffisances veineuse
- Œdèmes

Les contre-indications sont présentes dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

Les caractéristiques de l'appareil de pressothérapie i-Press série 6

- Nombre de cellules par bottes : 6 cellules.
 - Nombre de cellules avec manchon (en option) : 5 cellules.
 - Nombre de cellules avec ceinture (en option) : 5 cellules.
- Programmes prédéfinis : 21.

- Type de flux : ascendant et descendant.
- Température de fonctionnement : 15°C à 35°C.
- Puissance : 50 VA.
- Pression réglable : 30 à 100 mmHg (par pas de 5 mmHg).

- Durée des soins :
- Dimensions : 36 x 32 x 11,5 cm.
- Poids : 5,3 kg.
- Alimentation : secteur.

Livré avec une paire de bottes 6 cellules Optimum.

Qu'est-ce que le drainage pneumatique ?

Le **drainage pneumatique** doit venir en complément, et non en remplacement des techniques. Il apporte aux praticiens une aide supplémentaire au traitement de leurs patients, voir un outil indispensable au traitement des œdèmes. Le drainage pneumatique conduit à la décongestion, il sera alors utilisé avant un drainage manuel, alors que dans d'autres cas, il pourra être utilisé en simultané, ou encore après un drainage manuel pour renforcer et prolonger ses effets.

Attributs du produit :